

# INDIVIDUAL IR & RAMAN SPECTRAL DATABASES



インストール手順書

# 目次

---

はじめに .....	- 1 -
インストールする前に.....	- 1 -
ステップ 1 - KnowItAll のインストール.....	- 2 -
ステップ 2 - ライセンスのアクティベート ...	- 4 -
ステップ 3 - データベース .....	- 5 -
個別のデータベース .....	- 7 -
技術サポート .....	- 8 -
リソース : .....	- 8 -
付録 - オフラインでのライセンスアクティベー ション .....	- 9 -
A) スマートフォンでアクティベートする	- 9 -
-	
B) 別のコンピューターを使用してアクティ ベートする .....	- 11 -

---

## はじめに

---

本書は、「スタンドアロン」の IR またはラマンデータベース購入者のためのインストール手順について説明します (KnowItAll スペクトルライブラリの「サブスクリプション」とは異なります)。

**注：** KnowItAll スペクトルライブラリーの「サブスクリプション」をご購入された場合は、「KnowItAll ソフトウェアとライブラリ - インストール手順書」のブックレットを使用してください (<https://sciencesolutions.wiley.com/training/>からダウンロードできます)。

## インストールする前に

---

[www.knowitall.com/minimum\\_system](http://www.knowitall.com/minimum_system) に記載の推奨システムを確認してください。

ライセンスベリフィケーションコードが手元にあることを確認してください。ご購入時に Wiley のカスタマーサポートチームから電子メールで送信されるこのコードは、インストール時に必要となります。コードが見つからない場合は、[support@knowitall.com](mailto:support@knowitall.com) までご連絡ください。

**重要な注意点：** 個々の IR およびラマンデータベースのアクティベートはすべて、KnowItAll を介して行われます。データベースをアクティブ化するには、最初に KnowItAll ソフトウェアをインストールする必要があります。The KnowItAll ID Expert™ スペクトル同定アプリはデータベースの購入に含まれています。

KnowItAll のインストールとアクティベーションのプロセスが完了すると、次の場所にデータベースファイルが保管されます： C:\Users\Public\Documents\Wiley\KnowItAll\Databases

# ステップ 1 - KNOWITALL のインストール

デジタル配信（ソフトウェアダウンロード）を選択した場合：

- [www.knowitall.com/download](http://www.knowitall.com/download) にアクセスし、ライセンス検証コードを入力して、ソフトウェアをダウンロードします。



32bit 版 Windows をお使いの場合は、ページ下の 32bit 版をダウンロードする必要があります。

- インストールするには、ダウンロードされたインストール実行ファイル「KnowItAllInstall.exe」をダブルクリックしてください。


将来、KnowItAll をインストールし直す必要がある場合に備えて、デジタルダウンロードした.exe ファイルをバックアップとしてお持ちの USB（外付けドライブ）に保存されることをお勧めします。

郵送でパッケージ（インストール用 USB メディア）を受け取った場合：

- KnowItAll インストール用 USB をコンピューターに接続します。
- USB から KnowItAll Installation フォルダを開き、**KnowItAllInstall.exe** をダブルクリックして、指示に従ってインストールします。

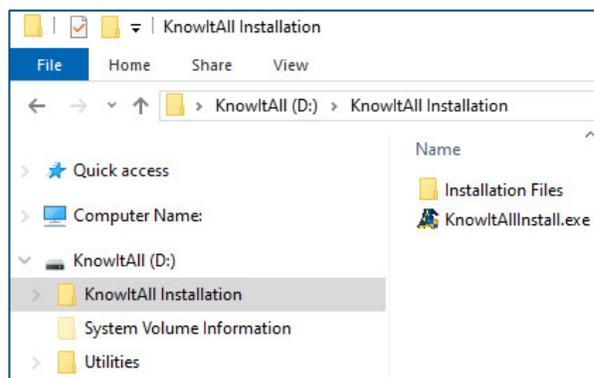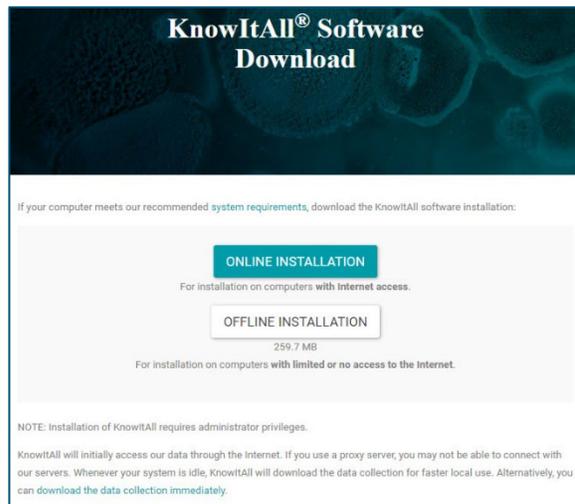


注： IR およびラマンデータベースは自動的にインストールされます。サブスクリプションに NMR、MS、UV-Vis のサブスクリプションを契約している場合は、適切なチェックボックスをオンにします。

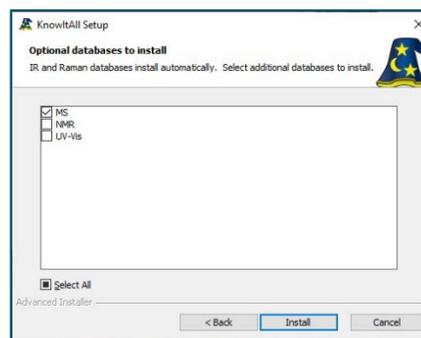

## ステップ 2 - ライセンスのアクティベート

- KnowItAll デスクトップアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。
- ライセンス検証コードを入力します。

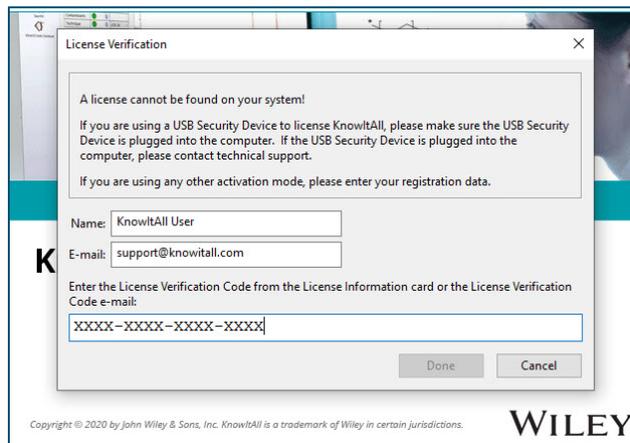


コンピューターのインターネット接続状況：

- インターネットに接続されている場合（推奨）、ライセンスが自動的にアクティブ化されます。
- インターネットに接続されていない場合、a) スマートフォンまたは、b) インターネットに接続されている別のコンピューターを使用してライセンスをアクティベートできます。このブックレットの付録にあるオフラインアクティベーションの詳細な手順を参照してください。

## ステップ 3 - データベース

コンピューターに KnowItAll データベースがなく、インターネットに接続している場合は、KnowItAll のガイドに従ってデータベースの検索とダウンロードができます。

KnowItAll データベースがあり、インターネットに接続されている場合は、「ライセンス」 > 「データベースダウンローダーを有効にする」を選択することで、既存のデータベースを自動的に更新できます。コンピューターがアイドル状態になると、更新された KnowItAll データベースのダウンロードが開始されます。環境によりダウンロード時間は異なります。次回 KnowItAll を起動するときに、新しいデータベースに更新するように求められる場合があります。


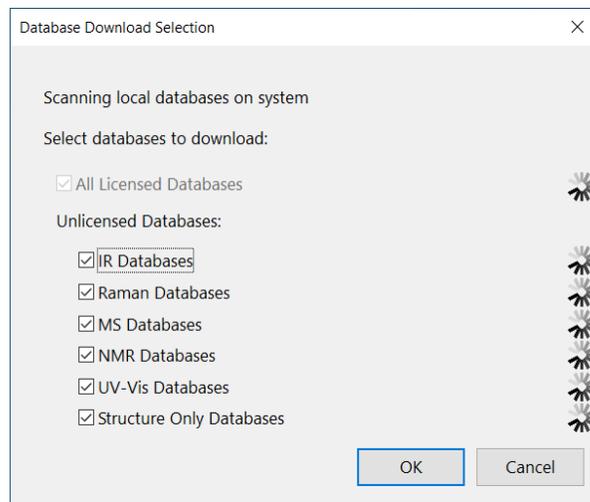


インターネットに接続していない場合は、以下から手動で更新データをダウンロードできます：


[www.knowitall.com/databaseupdate](http://www.knowitall.com/databaseupdate)

関連する\*.zip ファイルをダウンロードして、デスクトップに保存します。

**注：** 単一のデータベースを注文した場合は、その手法の zip ファイルをダウンロードしてデータベースをインストールします。

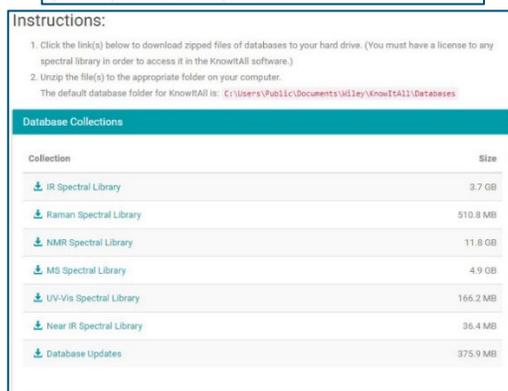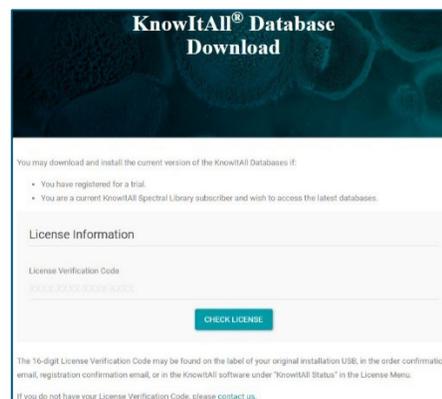


- KnowItAll は次のフォルダーを作成します：  
C:\Users\Public\Documents\Wiley\KnowItAll\Databases
- その手法のフォルダーを解凍し、Databases フォルダーに配置します。

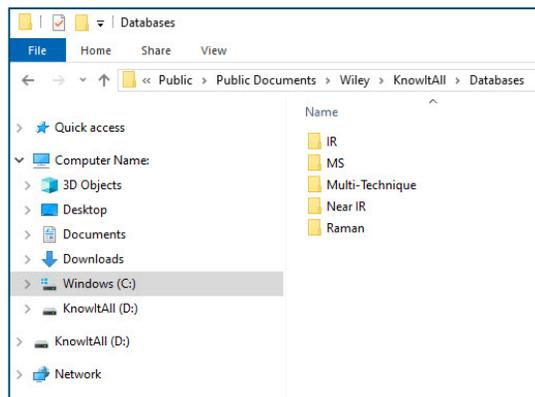

## 個別のデータベース

- 個別にライセンスされたデータベースのコピーをコンピューター上の別の場所に移動する必要がある場合は、ファイルを以下で見つけることができます：  
C:\Users\Public\Documents\Wiley\KnowItAll\Databases
- ライセンス検証コードが記載されている電子メールには、ご購入されたデータベースファイルの名前も記載されているので、電子メールを参照して Databases フォルダーでファイルを検索できます。
- 見つかった SDBX ファイルをハードドライブの目的の場所にコピーします。

注：SDX ファイルは、KnowItAll のみが使用できるインデックスファイルです。

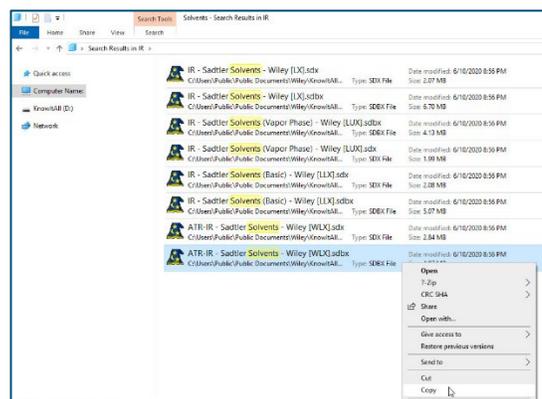

## 技術サポート

---

Wiley は、ライセンスされた KnowItAll 製品の「テクニカルサポートの終了日」までの「耐用年数」にわたりサポートを提供します。詳細については、[www.knowitall.com/supportpolicy](http://www.knowitall.com/supportpolicy) を参照してください。連絡先情報については、[www.knowitall.com/contactus](http://www.knowitall.com/contactus) をご覧ください。

### リソース：

ウェブサイト：[www.sciencesolutions.wiley.com](http://www.sciencesolutions.wiley.com)

サポート：[www.knowitall.com/support](http://www.knowitall.com/support)

トレーニングリソース：[www.knowitall.com/training](http://www.knowitall.com/training)

**KnowItAll Web ヘルプ**：<https://help.knowitall.com/>


# 付録 - オフラインでのライセンスアクティベーション

## ョン

インストールするコンピューターにインターネット接続がない場合は、この方法に従ってライセンスをアクティベートします。


ソフトウェアをインストールした後、KnowItAll デスクトップアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動し、ライセンスベリフィケーションコードを入力します。

次に、A) スマートフォンまたは、B) インターネットに接続された別のコンピューターのいずれかを使用してアクティベートします。

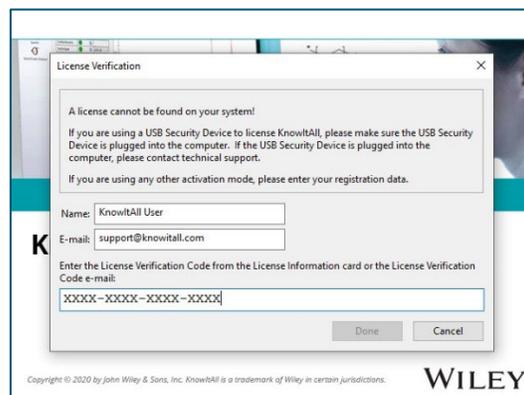


### A) スマートフォンでアクティベートする

- コンピューターがインターネットに接続されていないことが検出されます。スマートフォンを利用するため、「はい」を選択します。

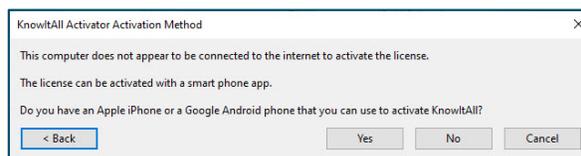


- Apple App Store または Google Play ストアから KnowItAll アクティベーターアプリをダウンロードし、KnowItAll から QR コードをスキャンします。
- レスポンスコードを受け取った場合は、表示されたボックスに入力します。

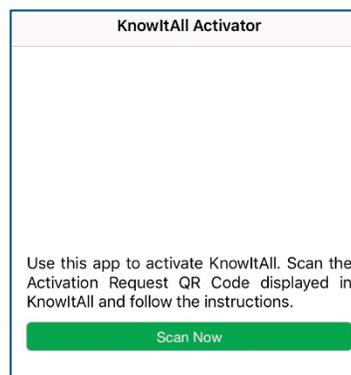


スマートフォンアプリ  
のスクリーンショット

- レスポンスコードを生成できなかった場合は、レスポンスファイル (\*.res) を受け取ります。
- ファイルを自分宛てに電子メールで送信します。

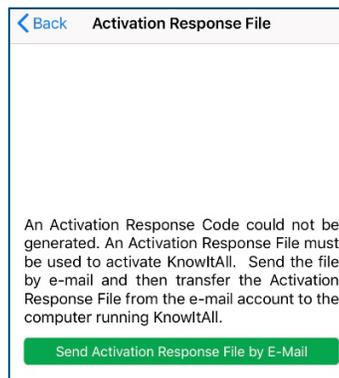


スマートフォンアプリ  
のスクリーンショット

- 別のオンラインコンピューターに電子メールで受け取ったレスポンスファイルをダウンロードします。
- レスポンスファイルを USB またはその他の転送可能なメディアに保存します。
- レスポンスファイルを、KnowItAll がインストールされているコンピューターにコピーします。

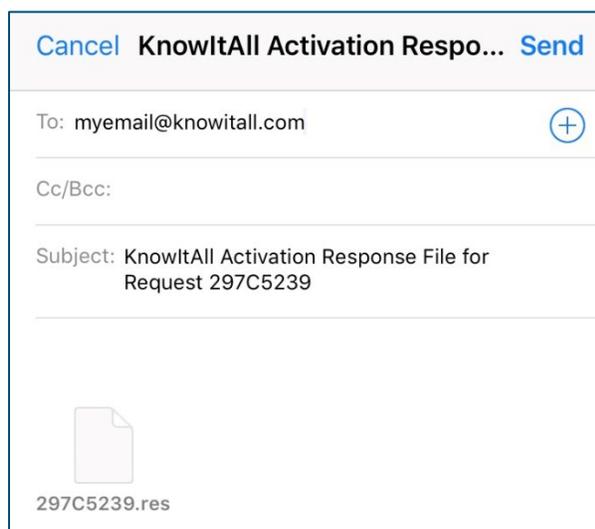


- 「ここをクリック」をクリックして、レスポンスファイルを開き、アクティベーションを完了します。

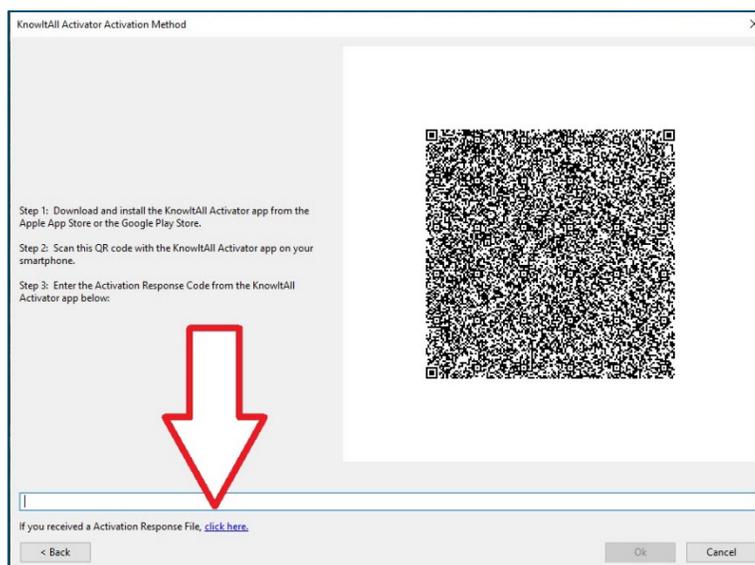


## B) 別のコンピューターを使用してアクティベートする

- コンピューターがインターネットに接続されていないことが検出されます。スマートフォンを利用しないため、「いいえ」を選択します。

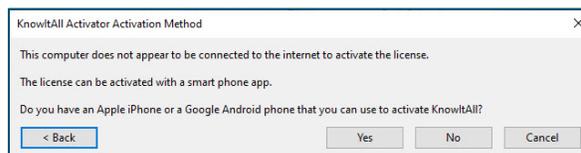

- アクティベーションリクエスト (\*.req) ファイルを保存します。
- リクエストファイルを USB またはその他の転送可能なメディアに移動します。
- リクエストファイルをネットワークに接続されている別のコンピューターに保存します。

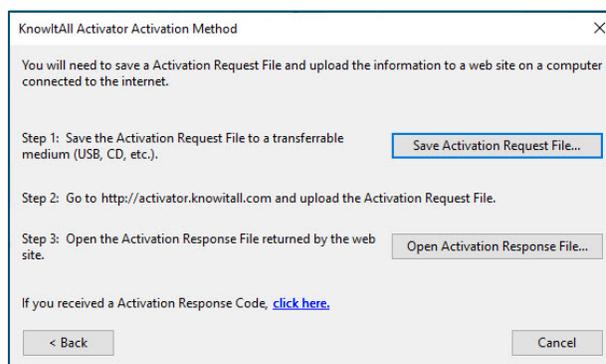

- activator.knowitall.com にアクセスします。
- リクエストファイルをアクティベーターの Web サイトにアップロードします。
- レスポンスファイルをダウンロードします。
  - レスポンスコードを受け取ったら、「ここをクリック」をクリックしてコードを入力します。
- レスポンスファイルを USB またはその他の転送可能なメディアに保存します。
- レスポンスファイルを、KnowItAll がインストールされているコンピューターにコピーします。
- KnowItAll から「アクティベーションレスポンスファイルを開く」をクリックします。



[sciencesolutions.wiley.com](https://sciencesolutions.wiley.com)