

# KNOWITALL SOFTWARE & LIBRARIES

---

インストール手順書

## 目次

---

はじめに .....	- 1 -
インストールする前に.....	- 1 -
ステップ 1 - KnowItAll のインストール.....	- 2 -
ステップ 2 - ライセンスのアクティベート ...	- 3 -
データベースを注文した場合 .....	- 4 -
技術サポート .....	- 6 -
リソース : .....	- 6 -
付録 - オフラインでのライセンスアクティベー ション.....	- 7 -
A) スマートフォンでアクティブ化する ..	- 7 -
B) 別ののコンピューターを使用してアクテ ィベートする.....	- 9 -

---

## はじめに

---

本書は、KnowItAll ソフトウェアと KnowItAll スペクトルライブラリのインストール手順について説明します。

**注：** KnowItAll スペクトルライブラリーの「サブスクリプション」ではなく、「個別」の IR またはラマン スペクトルデータベースをご購入された場合は、「個別の IR およびラマンスペクトルデータベース - インストール手順」のブックレットを使用してください (<https://sciencesolutions.wiley.com/training/>からダウンロードできます)。

## インストールする前に

---

[www.knowitall.com/minimum\\_system](http://www.knowitall.com/minimum_system) に記載の推奨システムを確認してください。

ライセンスベリフィケーションコードが手元にあることを確認してください。ご購入時に Wiley のカスタマーサポートチームから電子メールで送信されるこのコードは、インストール時に必要となります。コードが見つからない場合は、[support@knowitall.com](mailto:support@knowitall.com) までご連絡ください。

# ステップ 1 - KNOWITALL のインストール

デジタル配信（ソフトウェアダウンロード）を選択した場合：

- [www.knowitall.com/download](http://www.knowitall.com/download) にアクセスし、ライセンス検証コードを入力して、ソフトウェアをダウンロードします。

32bit 版 Windows をお使いの場合は、ページ下の 32bit 版をダウンロードする必要があります。



- 注: Wiley Database of Predicted IR Spectra 年間サブスクリプションを購入している場合は、データベースを <https://get.knowitall.com/Databases/> から個別にダウンロードし、C:\Users\Public\Documents\Wiley\KnowItAll\Databases/ に保存する必要があります
- インストールするには、ダウンロードされたインストール実行ファイル「KnowItAllInstall.exe」をダブルクリックしてください。



将来、KnowItAll をインストールし直す必要がある場合に備えて、デジタルダウンロードした.exe ファイルをバックアップとしてお持ちの USB（外付けドライブ）に保存されることをお勧めします。

郵送でパッケージ（インストール用 USB メディア）を受け取った場合：

- KnowItAll インストール用 USB をコンピューターに接続します。
- USB から KnowItAll Installation フォルダを開き、**KnowItAllInstall.exe** をダブルクリックして、指示に従ってインストールします。


注：IR およびラマンデータベースは自動的にインストールされます。サブスクリプションに NMR、MS、UV-Vis のサブスクリプションを契約している場合は、適切なチェックボックスをオンにします。

注: USB 経由でインストールしている場合でも、Wiley Database of Predicted IR Spectra 年間サブスクリプションを購入している場合は、データベースを <https://get.knowitall.com/Databases/> から個別にダウンロードし、C:\Users\Public\Documents\Wiley\KnowItAll\Databases/ に保存する必要があります

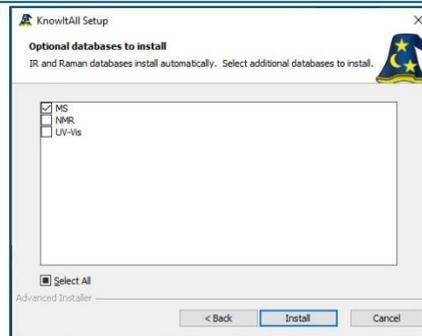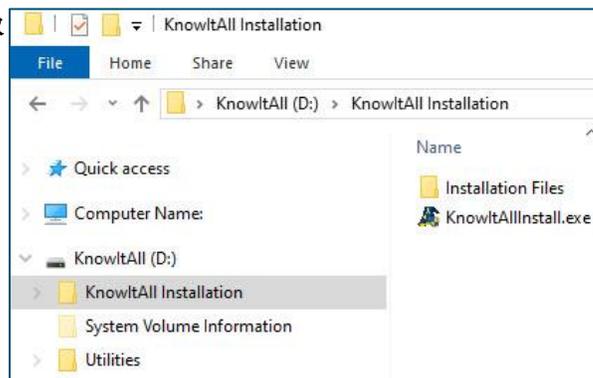

## ステップ 2 - ライセンスのアクティベート

- KnowItAll デスクトップアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。
- ライセンス検証コードを入力します。

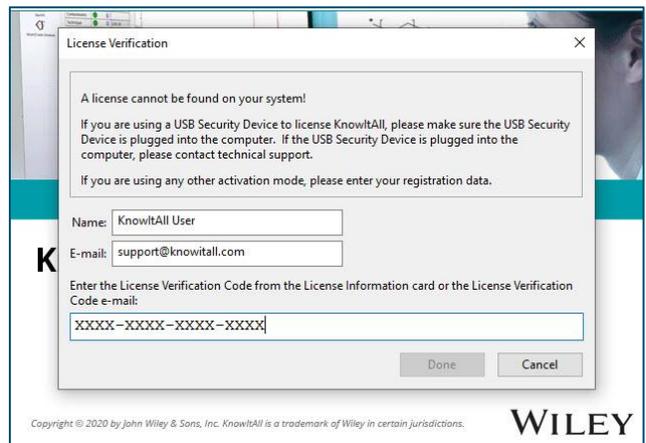


コンピューターのインターネット接続状況：

- インターネットに接続されている場合（推奨）、ライセンスは自動的にアクティブ化されます。
- インターネットに接続されていない場合、a) スマートフォンまたは、b) インターネットに接続されている別のコンピューターを使用してライセンスをアクティベートできます。このブックレットの付録にあるオフラインアクティベーションの詳細な手順を参照してください。

## データベースを注文した場合

コンピューターに KnowItAll データベースがなく、インターネットに接続している場合は、KnowItAll のガイドに従ってデータベースの検索とダウンロードができます。

KnowItAll データベースがあり、インターネットに接続されている場合は、「ライセンス」 > 「データベースダウンロードを有効にする」を選択することで、既存のデータベースを自動的に更新できます。コンピューターがアイドル状態になると、更新された KnowItAll データベースのダウンロードが開始されます。環境によりダウンロード時間は異なります。次回 KnowItAll を起動するときに、新しいデータベースに更新するように求められる場合があります。


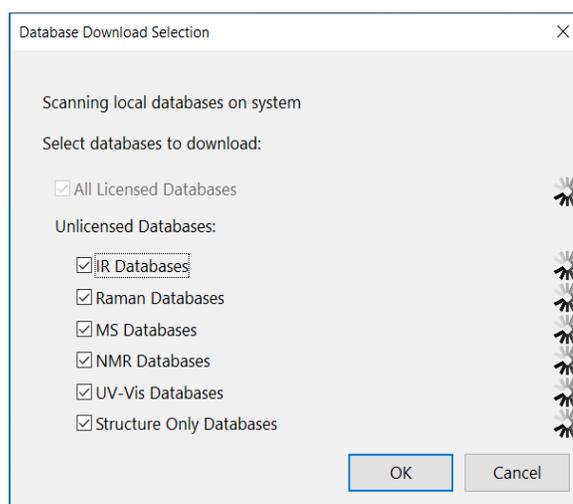


コンピューターがインターネットに接続されていない場合は、[ここから](#)スペクトルデータベースをダウンロードできます。


Wiley Database of Predicted IR Spectra 年間サブスクリプションを購入している場合は、[ここから](#)これらのファイルを個別にダウンロードする必要があります。

関連する\*.zip ファイルをダウンロードして、デスクトップに保存します。

**注：** 単一のデータベースを注文した場合は、その手法の zip ファイルをダウンロードしてデータベースをインストールします。

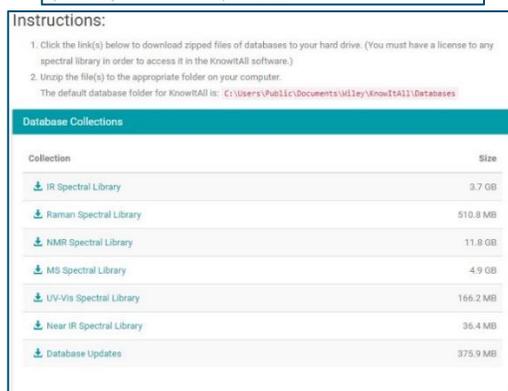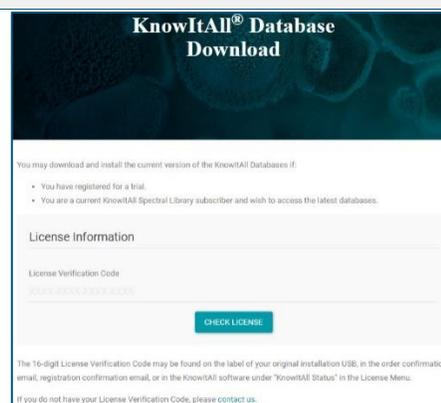

- KnowItAll は次のフォルダーを作成します：  
C:\Users\Public\Documents\Wiley\KnowItAll\Databases
- その手法のフォルダーを解凍し、Databases フォルダーに配置します。

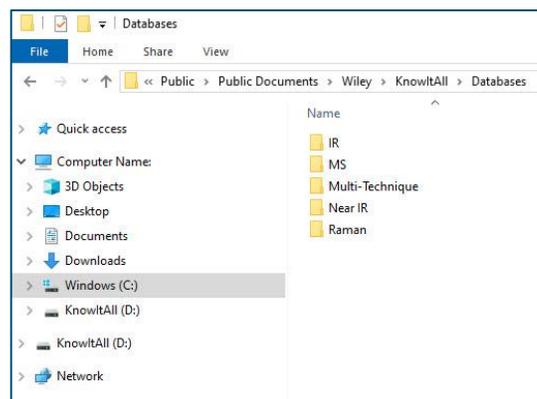

# 技術サポート

---

Wiley は、ライセンスされた KnowItAll 製品の「テクニカルサポートの終了日」までの「耐用年数」にわたりサポートを提供します。詳細については、[www.knowitall.com/supportpolicy](http://www.knowitall.com/supportpolicy) を参照してください。連絡先情報については、<http://www.knowitall.com/contactus> をご覧ください。

## リソース：

ウェブサイト：[www.sciencesolutions.wiley.com](http://www.sciencesolutions.wiley.com)

サポート：[www.knowitall.com/support](http://www.knowitall.com/support)

トレーニングリソース：<http://www.knowitall.com/training>

**KnowItAll Web ヘルプ**：<https://help.knowitall.com>


# 付録 - オフラインでのライセンスアクティベーション

## ヨン

インストールするコンピューターにインターネット接続がない場合は、この方法に従ってライセンスをアクティベートします。

ソフトウェアをインストールした後、KnowItAll デスクトップアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動し、ライセンスベリフィケーションコードを入力します。

次に、A) スマートフォンまたは、B) インターネットに接続された別のコンピューターのいずれかを使用してアクティベートします。

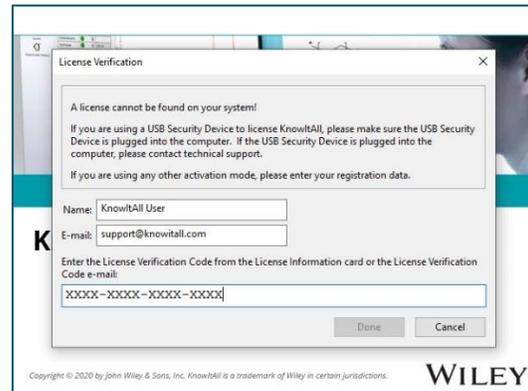


### A) スマートフォンでアクティベートする

- コンピューターがインターネットに接続されていないことが検出されます。スマートフォンを利用するため、「はい」を選択します。




- Apple App Store または Google Play ストアから KnowItAll アクティベーターアプリをダウンロードし、KnowItAll から QR コードをスキャンします。
- レスponseコードを受け取った場合は、表示されたボックスに入力します。

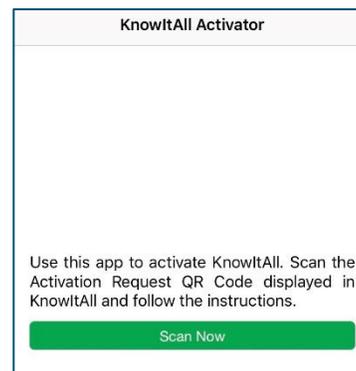


スマートフォンアプリ  
のスクリーンショット

- レスポンスコードを生成できなかった場合は、レスポンスファイル (\*.res) を受け取ります。
- ファイルを自分宛てに電子メールで送信します。

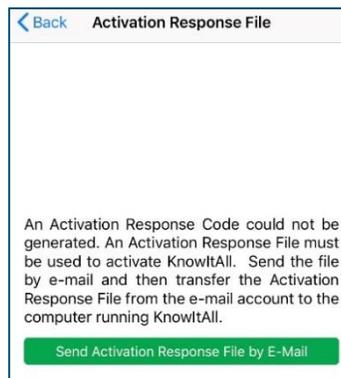


スマートフォンアプリ  
のスクリーンショット

- 別のオンラインコンピューターに電子メールで受け取ったレスポンスファイルをダウンロードします。
- レスポンスファイルを USB またはその他の転送可能なメディアに保存します。
- レスポンスファイルを、KnowItAll がインストールされているコンピューターにコピーします。


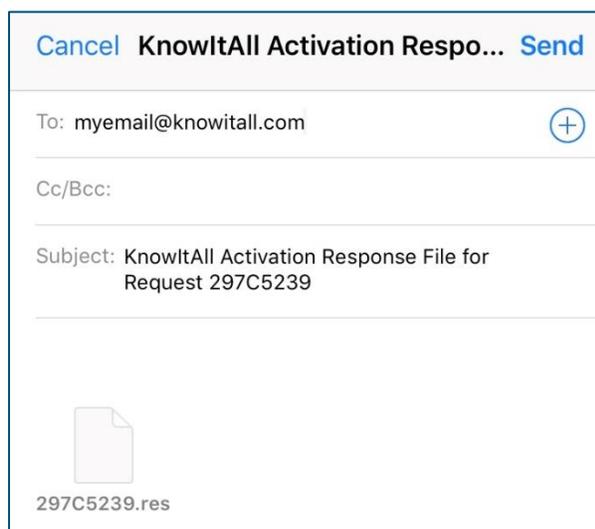


- 「ここをクリック」をクリックして、レスポンスファイルを開き、アクティベーションを完了します。

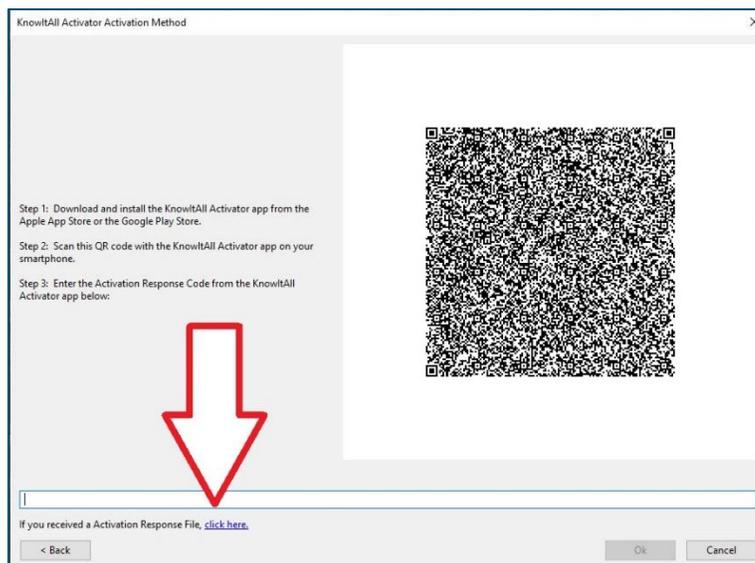

## B) 別のコンピューターを使用してアクティベートする

- コンピューターがインターネットに接続されていないことが検出されます。スマートフォンを利用しないため、「いいえ」を選択します。
- アクティベーションリクエスト (\*.req) ファイルを保存します。
- リクエストファイルを USB またはその他の転送可能なメディアに移動します。
- リクエストファイルをネットワークに接続されている別のコンピューターに保存します。
- activator.knowitall.com にアクセスします。
- リクエストファイルをアクティベーターの Web サイトにアップロードします。
- レスポンスファイルがダウンロードされてきます。
  - レスポンスコードを受け取ったら、「[ここをクリック](#)」をクリックしてコードを入力します。
- レスポンスファイルを USB またはその他の転送可能なメディアに保存します。
- レスポンスファイルを、KnowItAll がインストールされているコンピューターにコピーします。
- KnowItAll から「[アクティベーションレスポンスファイルを開く](#)」をクリックします。

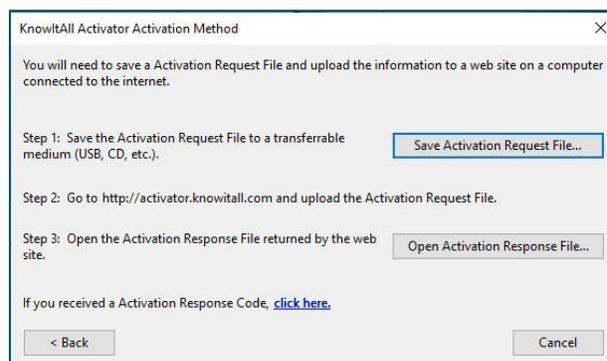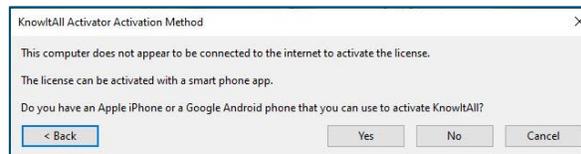

[sciencesolutions.wiley.com](https://sciencesolutions.wiley.com)