

WILEY

KNOWITALL

ソフトウェア & ライブラリー

インストール手順書

これらの手順は以下の製品用です。

- KnowItAllソフトウェア & KnowItAllスペクトルライブラリー (IR、MS、NMR、ラマン、UV-Vis)
- KnowItAll ChemWindowソフトウェア
- 個々の IR およびラマンデータベース (非サブスクリプション)

Copyright

KnowItAll Installation Instructions
Copyright© 2024
John Wiley & Sons, Inc.
All Rights Reserved.

本出版物のいかなる部分も、米国著作権法の下で許可された場合を除き、出版社または著者の書面による許可なく、複製することは禁じられています。

KnowItAll および *ChemWindow* は、特定の法域における *John Wiley & Sons.* の商標です。

目次

KNOWITALL	1
ソフトウェア&	1
ライブラリー	1
はじめに	4
インストールする前に	4
ステップ1 - KnowItAllのインストール.....	4
郵送でパッケージ（インストール用USBメディア）を受け取った場合:	5
ステップ2 - ライセンスのアクティベート	5
データベースを注文した場合	5
技術サポート	7
リソース	7
付録:	8
A) スマートフォンでアクティベートする:	8

はじめに

以下のいずれかの製品をお持ちの場合は、以下のインストール手順に従ってください。

- KnowItAllソフトウェア& KnowItAllスペクトルライブラリー (IR、MS、NMR、ラマン、UV-Vis)
- KnowItAll ChemWindowソフトウェア
- 個々の IR およびラマンデータベース (非サブスクリプション)

インストールする前に

1. www.knowitall.com/minimum_system に記載の推奨システムを確認してください。
2. ライセンスベリフィケーションコードが手元にあることを確認してください。ご購入時にWileyのカスタマーサポートチームから電子メールで送信されるこのコードは、インストール時に必要となります。コードが見つからない場合は、support@knowitall.com までご連絡ください

ステップ1 - KnowItAllのインストール

デジタル配信 (ソフトウェアダウンロード) を選択した場合 :

1. www.knowitall.com/download にアクセスし、ライセンスベリフィケーションコードを入力して、ソフトウェアをダウンロードします。

32bit版Windowsをお使いの場合は、ページ下の32bit版をダウンロードする必要があります。

2. インストールするには、ダウンロードされたインストール実行ファイル
「**KnowItAllInstall.exe**」をダブルクリックし、インストールウィザードの指示に従ってください。

将来、KnowItAllをインストールし直す必要がある場合に備えて、デジタルダウンロードした.exeファイルをバックアップとしてお持ちのUSB (外付けドライブ) に保存されることをお勧めします。

郵送でパッケージ（インストール用USBメディア）を受け取った場合:

1. KnowItAllインストール用USBをコンピューターに接続します。
2. USBからKnowItAll Installationフォルダーを開き、**KnowItAllInstall.exe**をダブルクリックして、指示に従ってインストールします。

注： IRおよびラマンデータベースは自動的にインストールされます。サブスクリプションにNMR、MS、UV-Visのサブスクリプションを契約している場合は、適切なチェックボックスをオンにします

ステップ2 - ライセンスのアクティベート

- KnowItAllデスクトップアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。
- ライセンスベリフィケーションコードを入力します。

コンピューターのインターネット接続状況:


- インターネットに接続されている場合（推奨）、ライセンスは自動的にアクティブ化されます。
- インターネットに接続されていない場合、a) スマートフォンまたは、b) インターネットに接続されている別のコンピューターを使用してライセンスをアクティベートできます。

このブックレットの付録にあるオフラインアクティベーションの詳細な手順を参照してください

データベースを注文した場合

コンピューターにKnowItAllデータベースがなく、インターネットに接続している場合は、KnowItAllのガイドに従ってデータベースの検索とダウンロードができます

KnowItAllデータベースがあり、インターネットに接続されている場合は、「ライセンス」>「データベースダウンロードを有効にする」を選択することで、既存のデータベースを自動的に更新できます。コンピューターがアイドル状態になると、更新されたKnowItAllデータベースのダウンロードが開始されます。環境によりダウンロード時間は異なります。次回KnowItAllを起動するときに、新しいデータベースに更新するように求められる場合があります

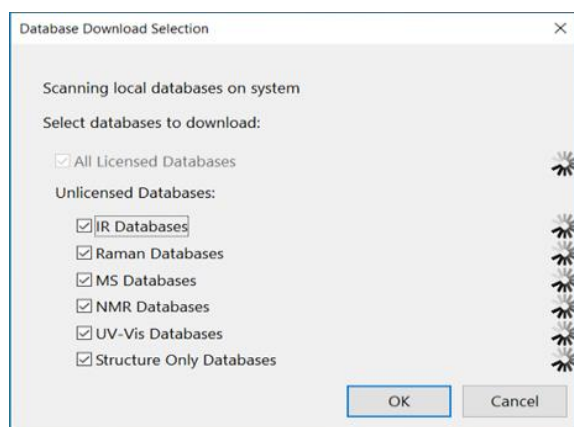

コンピューターがインターネットに接続されていない場合は、[ここから](https://get.knowitall.com/Databases/)スペクトル データベースをダウンロードできます。 : <https://get.knowitall.com/Databases/>

- 関連する*.zipファイルをダウンロードして、デスクトップに保存します。
- 将来、データベースをインストールし直す必要がある場合に備えて、*.zipファイルをバックアップとしてお持ちのUSB（外付けドライブ）に保存されることをお勧めします。
- 注： 単一のデータベースを注文した場合は、その手法のzipファイルをダウンロードしてデータベースをインストールしますKnowItAllは次のフォルダーを作成します：
C:\Users\Public\Documents\Wiley\KnowItAll\Databases.
- その手法のフォルダーを解凍し、Databasesフォルダーに配置します。

技術サポート

Wileyは、ライセンスされたKnowItAll製品の「テクニカルサポートの終了日」までの「耐用年数」にわたりサポートを提供します。詳細については、www.knowitall.com/supportpolicy を参照してください。連絡先情報については、<http://www.knowitall.com/contactus> をご覧ください。
<http://www.knowitall.com/contactus> をご覧ください。

リソース

- ウェブサイト: www.sciencesolutions.wiley.com
- サポート: www.knowitall.com/support
- トレーニングリソース: <http://www.knowitall.com/training>
- KnowItAll Web ヘルプ: <https://help.knowitall.com>

付録:

インストールするコンピューターにインターネット接続がない場合は、この方法に従ってライセンスをアクティベートします。

ソフトウェアをインストールした後、KnowItAllデスクトップアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動し、ライセンスベリフィケーションコードを入力します。

次に、A) スマートフォンまたは、B) インターネットに接続された別のコンピューターのいずれかを使用してアクティベートします。



それぞれのインストール手順については、以下を参照してください。

A) スマートフォンでアクティベートする:


コンピューターがインターネットに接続されていないことが検出されます。スマートフォンを利用するため、「はい」を選択します。

ダイアログに表示されるQRコードをスマートフォンのカメラでスキャンします。

注: アクティベーションレスポンスファイルを取得したら、このダイアログボックスに戻るので、以降のステップではこのKnowItAllダイアログボックスを開いたままにしてください。

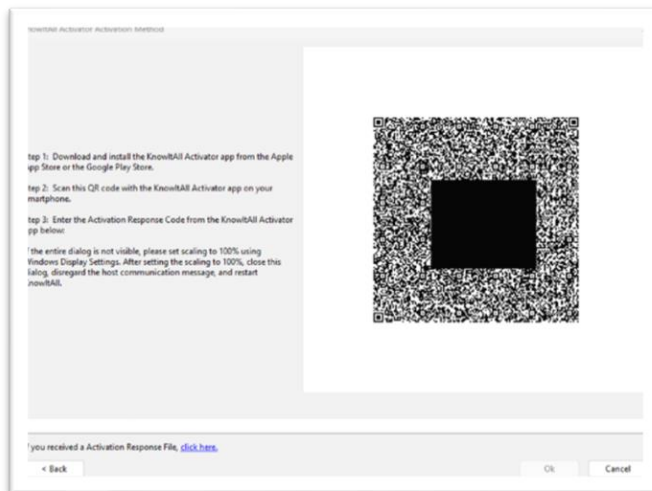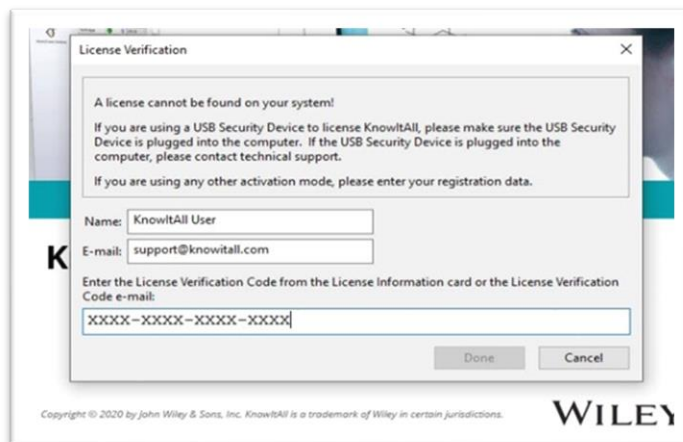

1. QRコードをスキャンすると、Activator.KnowItAll.comに移動し、レスポンスファイル (*.res) を取得します。
2. ファイルを自分宛てに電子メールで送信するか、スマートフォンにダウンロードするよう指示されたら、ファイルをダウンロードします。
3. 次に行うことは、そのレスポンスファイルをオフラインのKnowItAllがインストールされているコンピューターに戻すことです。そのためには、以下の手順を実行します。
 - a. 別のオンラインコンピューターに電子メールで受け取ったレスポンスファイルをダウンロードします。
 - b. レスポンスファイルをUSBまたはその他の転送可能なメディアに保存します。
 - c. レスポンスファイルを、KnowItAllがインストールされているコンピューターにコピーします。
4. 「ここをクリック」をクリックして、レスポンスファイルを開き、アクティベーションを完了します

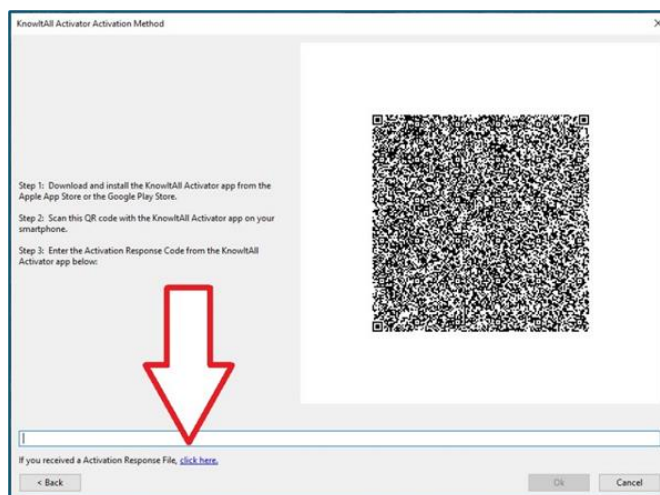

B)別のコンピューターを使用してアクティベートする:


コンピューターがインターネットに接続されていないことが検出されます。スマートフォンを利用しないため、「いいえ」を選択します。



1. ステップ1のボタンをクリックし、リクエストファイル (*.req) をUSBなどの転送可能なメディアに保存します。

注：アクティベーションレスポンスファイルを取得したら、このダイアログボックスに戻るので、以降のステップではこの**KnowItAll**ダイアログボックスを開いたままにしてください。

2. 次に、リクエストファイルをインターネットに接続されたコンピューターにコピーする必要があります。

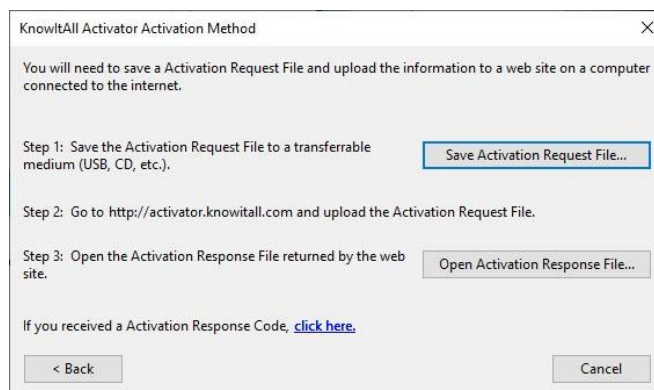

3. そのコンピューターから<https://Activator.KnowItAll.com>にアクセスし、「アクティベーションレスポンスファイルを閲覧する」を選択してリクエストファイルをアップロードします。

4. アクティベーターのサイトはレスポンスファイル (*.res) を返すため、これをダウンロードしてUSBに保存し、KnowItAllに転送します。レスポンスファイルを、オフラインのKnowItAllがインストールされているコンピューターにコピーします。

5. 最後に、ソフトウェアで開いたままのKnowItAllダイアログで、「アクティベーションレスポンスファイルを開く」をクリックし、ライセンスのアクティベーションを完了します。



Always use the most recently generated Activation Request File!

If you encounter errors, please email support@knowitall.com, including the request file and the URL used while trying to activate KnowItAll

sciencesolutions.wiley.com